


waterpik®
treat yourself better™

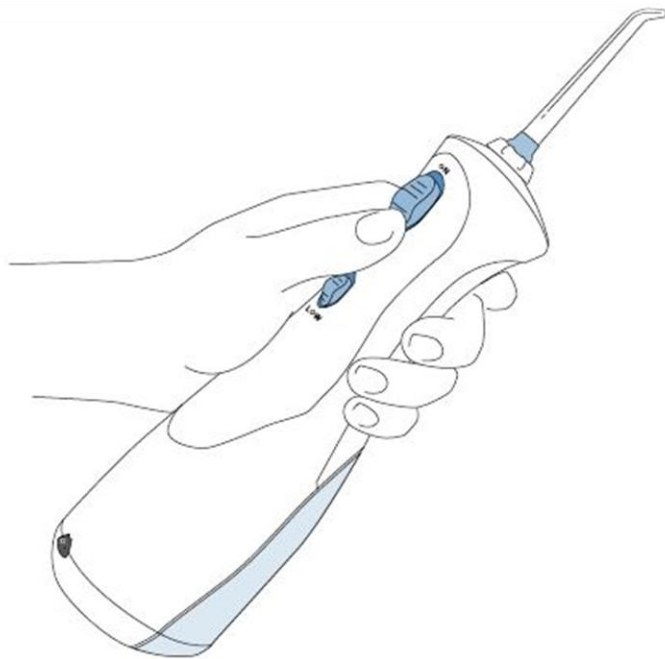

คู่มือการใช้งาน
Waterpik
Water Flosser
Model WP-450E2

ยินดีต้อนรับ


ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้

Waterpik Water Flosser เป็น

ผู้ดูแลสุขภาพปากและฟัน เพื่อรอยยิ้มที่สมบูรณ์

ด้วยผลทางการแพทย์ที่พิสูจน์แล้วว่า เครื่องทำความสะอาดฟันด้วยแรงดันน้ำ Waterpik สามารถขจัดเศษอาหาร คราบแบคทีเรียที่ติดอยู่ตามซอกฟันและใต้เหงือก ในบริเวณที่การแปรงฟันเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเข้าถึงได้

การแปรงฟันทั่วไป

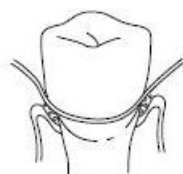

แปรงสีฟันทั่วไปไม่

สามารถขจัดเศษ

อาหารได้อย่างทั่วถึง

ในขณะที่ไหมขัดฟันมี

ข้อจำกัดในการเข้าถึง

บริเวณร่องเหงือก

การใช้ Waterpik ดูแลฟัน



Waterpik ช่วยขจัดเศษ

อาหาร คราบแบคทีเรีย

ได้อย่างหมดจดมากกว่า


ข้อควรระวัง.....อ่านคู่มือด้วยความระมัดระวังก่อนใช้งาน

- ห้ามจับอุปกรณ์ชาร์จขณะที่มือเปียก
- ห้ามนำอุปกรณ์จุ่มหรือแช่น้ำ
- ห้ามใช้ขณะอาบน้ำ
- ห้ามวางในที่ที่เครื่องอาจตกลงหล่น เพราะอาจเกิดความเสียหายกับมอเตอร์ด้านในเครื่อง
- หากอุปกรณ์ตกรน้ำ ห้ามหยิบขึ้นมาทันที ควรดึงปลั๊กออกก่อน
- ตรวจสอบสภาพสายชาร์จก่อนใช้งานทุกครั้งเพื่อเช็คอายุการใช้งาน
- ห้ามเสียบปลั๊กในที่ที่มีกำลังไฟต่างกัน (กำลังไฟในเมืองไทย 220V)
- ห้ามใช้อุปกรณ์หากเครื่องชำรุด หรือกำลังชาร์จอยู่ หากพบปัญหากรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อมา หรือ waterpik@conice.co.th
- ห้ามฉีดน้ำเข้าไปใต้ลิ้น ในหู จมูก หรือบริเวณอื่นนอกเหนือจากปากและฟัน
- ใช้อุปกรณ์ภายใต้คำแนะนำของคู่มือหรือ ตามคำแนะนำของทันตแพทย์
- ควรใช้ร่วมกับกับหัวฉีดและอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ของ Waterpik เท่านั้น

ข้อควรระวัง.....อ่านคู่มือด้วยความระมัดระวังก่อนใช้งาน (ต่อ)

- ใช้ร่วมกับน้ำสะอาด หรือน้ำเกลือที่ทันตแพทย์แนะนำเท่านั้น
- ห้ามนำสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดใส่เข้าไปในอุปกรณ์
- ขณะชาร์จอุปกรณ์ ควรระวังไม่ให้สายชาร์จสัมผัสความร้อน
- ไม่ควรใช้น้ำยาบ้วนปาก สารที่ผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารฟอกสี หรือน้ำมัน Tea Tree
- ท่านที่เลียริมฟันด้วยทอง หรือฝังเพชรที่ฟัน ไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ในช่วงที่มีแผลอยู่ในช่องปาก และลิ้น
- เด็กควรใช้อุปกรณ์ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด

Product Description

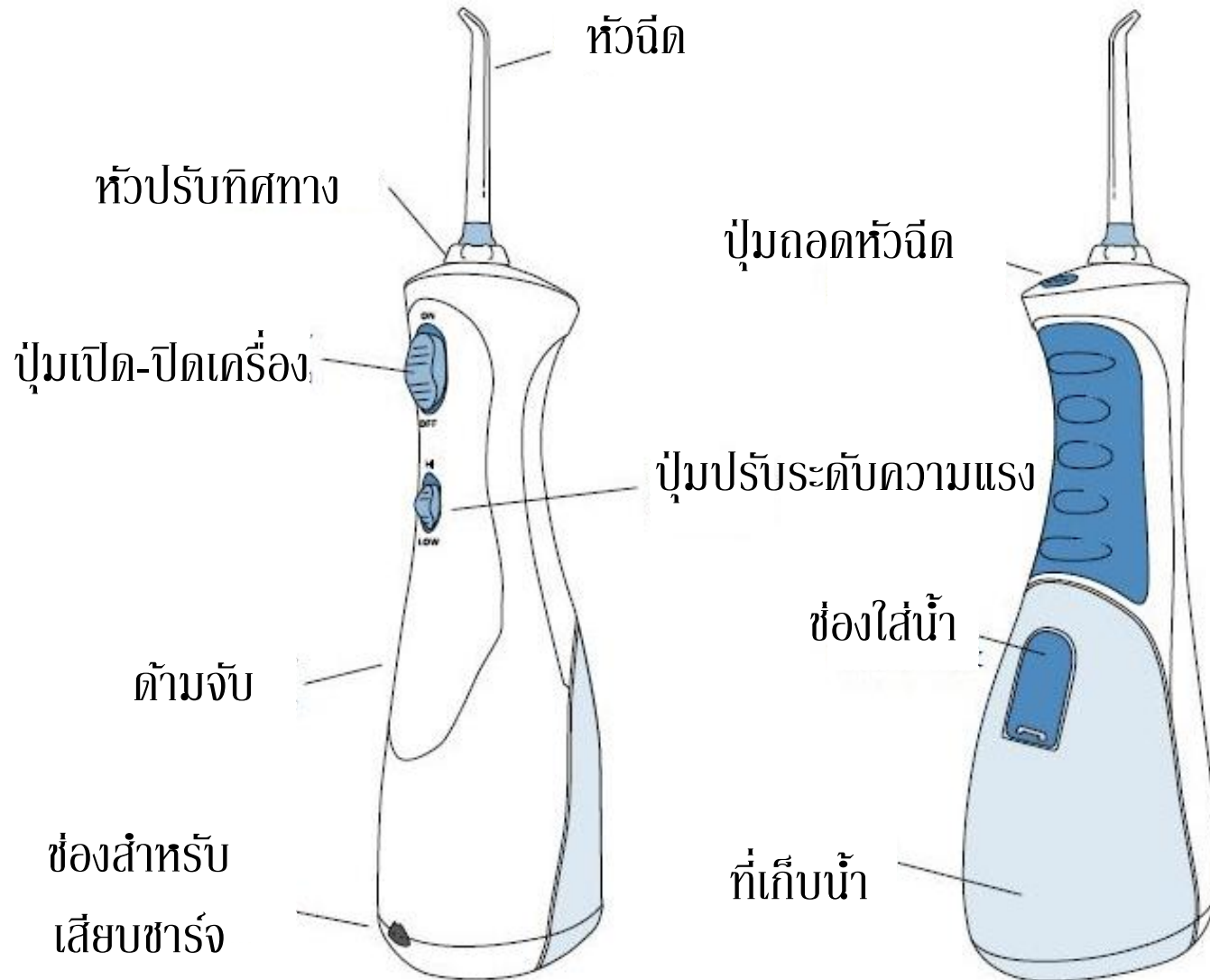




Plaque Seeker™
Tip



Classic Jet
Tip



Tongue
Cleaner Tip

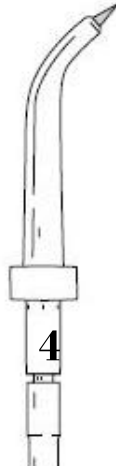


Pik Pocket™
Tip



Orthodontic
Tip



Toothbrush
Tip

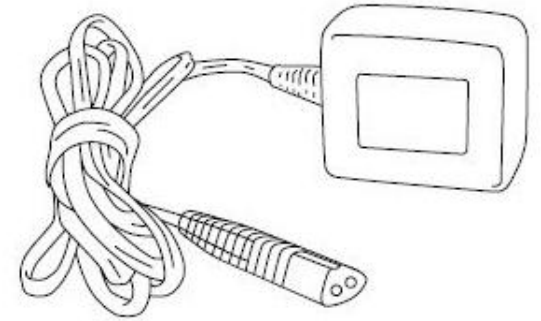

Charger
Water Pik PN 20012047

อุปกรณ์สำหรับ
ชาร์จแบตเตอรี่

1. หัวฉีดทำความสะอาดคราบพลัค
2. หัวฉีดทำความสะอาดทั่วไป
3. แปรงขูดทำความสะอาดลิ้น
4. แปรงทำความสะอาดร่องเหงือก
5. แปรงสำหรับผู้จัดฟัน
6. หัวฉีดพร้อมแปรงสีฟัน

สามารถสั่งซื้อหัวฉีดและอุปกรณ์เสริมได้ที่
บริษัทโคไนซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด


www.waterpikthailand.com

หรือโทร 02-276-9644

เริ่มใช้งาน


ข้อควรระวัง!!

เลื่อนปุ่มเปิด - ปิดเครื่องไปที่ OFF และชาร์จแบตเตอรี่ครั้งแรกก่อนใช้งาน 24 ชั่วโมง (อุปกรณ์จะไม่ชาร์จหากเครื่องอยู่ที่โหมด ON) การชาร์จต่อ 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้นานถึง 2 สัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน

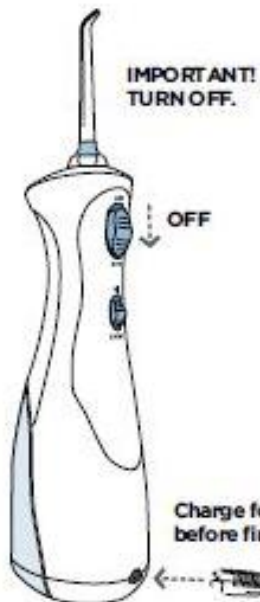

การเติมน้ำ

ถอดสายชาร์จออกจากอุปกรณ์ก่อนเปิดฝาแล้วเติมน้ำ

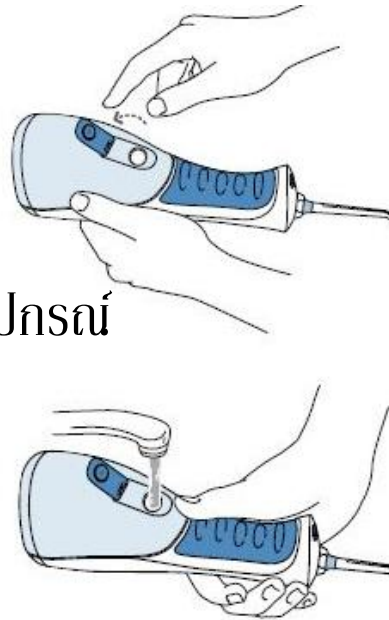

การใส่หัวฉีด

นำหัวฉีดใส่ลงไปลงในช่องด้านบนของอุปกรณ์ วงแหวนสีแดง (หรือน้ำเงิน) จะติดสนิทกับหัวปรับทิศทาง



การถอดหัวฉีด

กดปุ่มถอดหัวฉีดสีฟ้าด้านบนของอุปกรณ์ แล้วดึงหัวฉีดออก




เริ่มใช้งาน (ต่อ)


การปรับความแรงของน้ำ

สามารถปรับความแรงของน้ำได้อย่างง่ายดาย เพียงเลื่อนปุ่มปรับความแรงไปที่โหมดต่างๆ

- Low หากต้องการแรงดันน้ำระดับปานกลาง สำหรับทำความสะอาดฟันและเหงือกที่ค่อนข้างไวต่อความรู้สึก
- High หากต้องการแรงดันน้ำระดับสูงสุด เพื่อชะล้างเศษอาหารที่ติดแน่นอยู่บริเวณซอกฟัน และใต้เหงือก

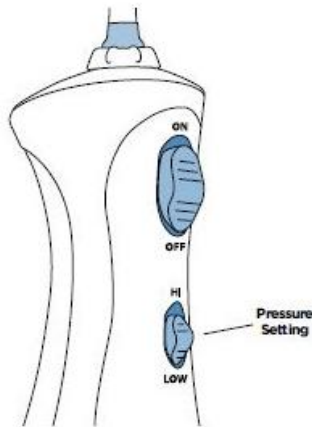


ปรับทิศทางของหัวฉีดได้โดยบิดหัวปรับทิศทางตามต้องการ

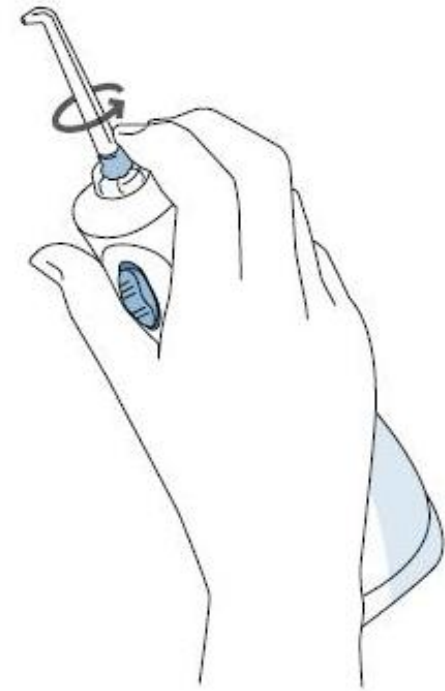


เริ่มใช้งาน (ต่อ)

ยื่นไถ่ล่างอ่างน้ำ จากนั้นใส่หัวฉีดเข้าไปในปาก กด
ปุ่มเปิดเครื่องแล้วค่อยๆปล่อยให้น้ำไหลไปตาม
ซอกฟันที่ละซี่

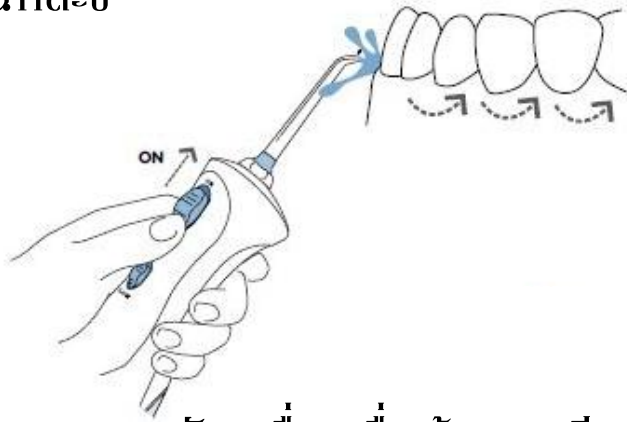


ทำมุม 90 องศา กับเครื่องเมื่อต้องการฉีดน้ำ
บริเวณด้านในฟัน ระยะห่างไถ่ล่างปาก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการกระจายของน้ำ ปล่อยให้น้ำไหลออก
จากปากลงอ่างน้ำ ชยับมือเพื่อให้อุปกรณ์ฉีดน้ำ
เข้าไปทำความสะอาดฟันที่ละซี่จนครบทั่วทั้งปาก

การใช้ร่วมกับน้ำยาบ้วนปากและน้ำเกลือ
สามารถใช้อุปกรณ์ผสมกับน้ำยาบ้วนปาก
หรือน้ำเกลืออื่นๆที่ทันตแพทย์แนะนำได้
เพียงแต่ต้องทำความสะอาดที่เก็บน้ำทุก
ครั้งหลังใช้งาน โดยเติมน้ำอุ่นสะอาดเข้าไป
แล้วเปิดเครื่อง ปล่อยให้น้ำไหลผ่านหัวฉีด
ลงอ่างน้ำจนหมด

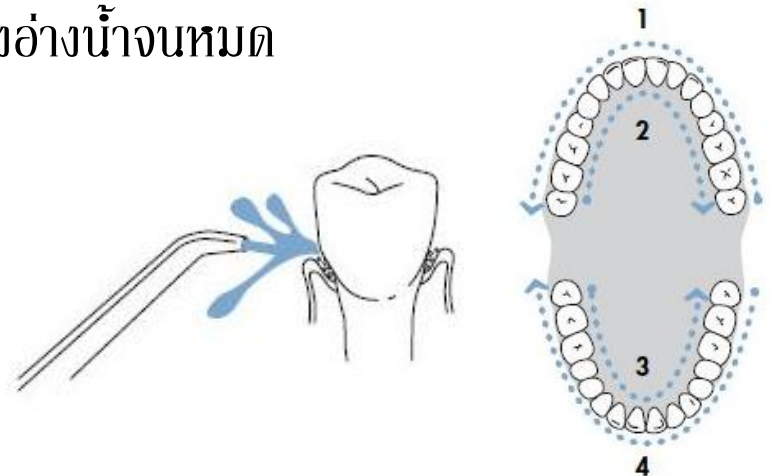


เริ่มใช้งาน (ต่อ)


หลังใช้งานเสร็จแล้ว กดปุ่ม OFF เพื่อปิดเครื่อง เทน้ำที่เหลือในอุปกรณ์ออกให้หมด

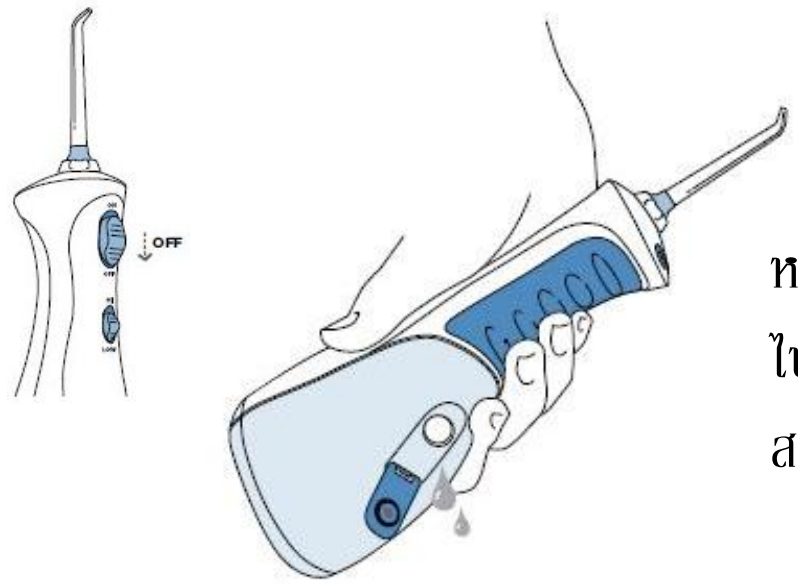

สามารถถอดที่เก็บน้ำแยกออกจากตัวอุปกรณ์ได้ หากต้องการ โดยเลื่อนตัวล็อกใต้เครื่องเพื่อดึงที่เก็บน้ำออก

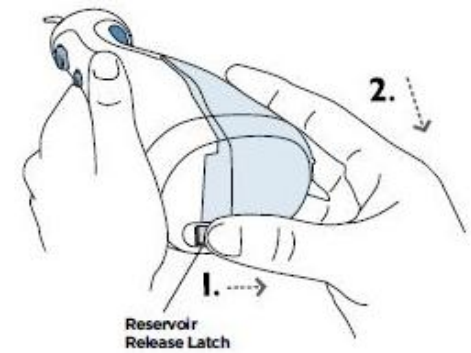

หากต้องการประกอบเข้าที่เดิม ให้วางที่เก็บน้ำเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์แล้วเลื่อนชิ้นเบาๆจนเครื่องติดสนิทเข้าไว้ด้วยกัน

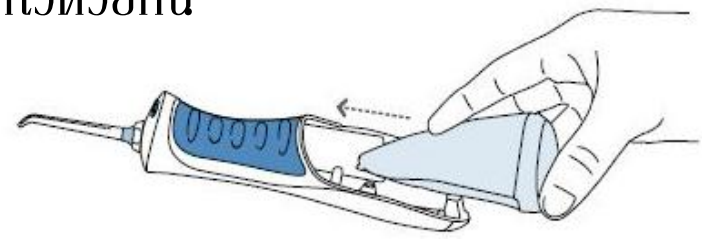

วิธีการใช้งานหัวฉีดต่างๆ

หัวฉีดทำความสะอาดร่องเหงือก (Pik Pocket)


ถูกออกแบบมาเพื่อให้้ำไหลผ่านไปทำความสะอาดซอกซอนถึง
เชื้อหุ้มฟัน ไม่เหมาะสำหรับใช้ฉีดทำความสะอาดทั่วไป การใช้งานคล้ายหัวฉีด Jet Tip เพียงแต่
เอียงมือ 45 องศา นำหัวฉีดไปวางไว้ที่เหงือก เปิดเครื่องทำความสะอาดจนร่องเหงือกไม่มีเศษ
อาหารตกค้าง (เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่สะพานฟัน- ครอบฟัน)

หมายเหตุ: หัวฉีดทำความสะอาดร่องเหงือกใช้กับระดับน้ำในโหมด Low เท่านั้น


หัวแปรงทำความสะอาดลิ้น (Tongue Cleaner Tip)

วางแปรงขูดลิ้นไว้บนลิ้นแล้วขูดเบาๆ เพื่อให้ น้ำชะล้างคราบสกปรก

แปรงสำหรับผู้จัดฟัน (Orthodontic Tip)

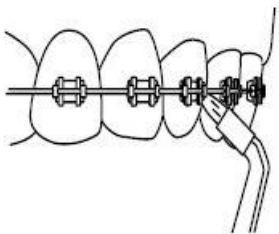

ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดบริเวณ
เหล็กจัดฟัน โดยเริ่มต้นจากด้านในสุด

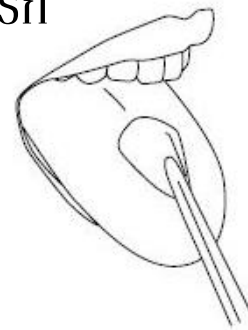

วิธีการใช้งานหัวฉีดต่าง ๆ


หัวฉีดแปรงสีฟัน (Toothbrush Tip)

วางแปรงสีฟันเข้าไปในปาก โดยให้หัวแปรงอยู่บนซี่ฟัน สามารถใช้ร่วมกับยาสีฟันได้ (ขนแปรงไม่โค้งงอตามลักษณะฟัน) ค่อย ๆ เลื่อนมือไป-มา ให้แปรงทำความสะอาดฟันทีละซี่




หัวฉีดทำความสะอาดคราบพลัค (Plaque Seeker)

วางหัวฉีดเข้าไปในปากเหมือนหัวฉีดอื่น ๆ โดยวางให้ใกล้กับร่องเหงือก เพื่อที่แปรงจะได้ทำความสะอาดบริเวณใต้เหงือกได้อย่างหมดจด

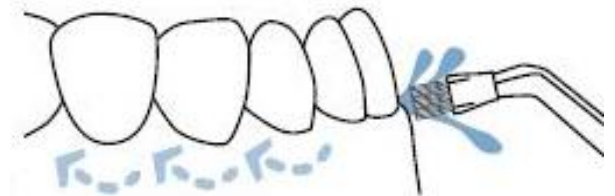

อายุการใช้งานของหัวฉีดแต่ละรุ่น

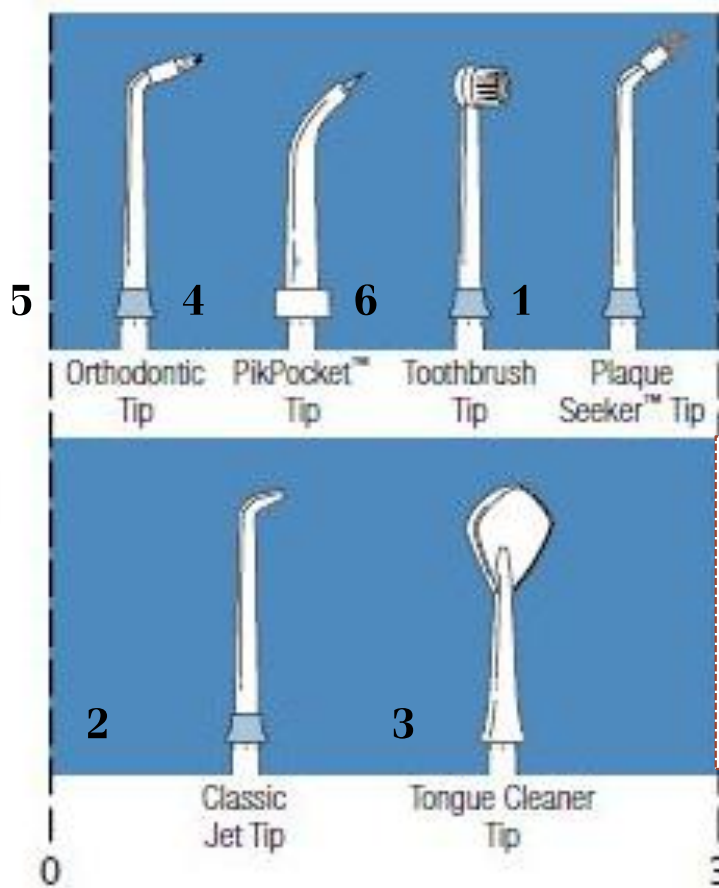

เปลี่ยนทุกๆ 3 เดือน

เปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน

1. หัวฉีดทำความสะอาดคราบพลัค
2. หัวฉีดทำความสะอาดทั่วไป
3. แปรงชุดทำความสะอาดลิ้น
4. แปรงทำความสะอาดร่องเหงือก
5. แปรงสำหรับผู้จัดฟัน
6. หัวฉีดพร้อมแปรงสีฟัน

วิธีการดูแล รักษาอุปกรณ์

- ไม่นำอุปกรณ์ล้างน้ำ หากต้องการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำผสมน้ำยาอ่อน ๆ เช็ดภายนอก ส่วนที่เก็บน้ำสามารถถอดมาล้างทำความสะอาดได้
- ถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง
- ก่อนนำอุปกรณ์ไปใช้ในที่ ๆ อุณหภูมิต่ำ (ประเทศที่มีอากาศหนาว) อุปกรณ์ไม่ควรมีน้ำอยู่แบตเตอรี่
- ก่อนการใช้งานครั้งแรก ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง
- หากใช้อุปกรณ์วันละครั้ง หรือน้อยกว่านั้น แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่อาทิตย์ละครั้ง โดยชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืน หากใช้มากกว่า 2 ครั้งต่อวันหรือดีกกว่านั้นควรชาร์จให้ถึงขั้นและไม่ต้องรอนแบตเตอรี่หมด สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เลย
- ไม่ควรมีน้ำตกค้างอยู่ในอุปกรณ์ขณะทำการชาร์จ เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
- หากแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน ควรส่งให้บริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้เปลี่ยนให้ใหม่
- ติดต่อบริษัทโคไนซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด โทร.02-276-9644 หรือ waterpik @conice.co.th

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
น้ำรั่วระหว่างหัวฉีดและหัวปรับทิศทาง	หัวฉีดใส่ไม่ถูกต้อง	ถอดหัวฉีดออกจากอุปกรณ์แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่
น้ำรั่วออกมาจากที่ใส่น้ำ	- มีน้ำตกค้างจากการใช้ก่อนหน้านี้ - ที่เก็บน้ำกับด้ามจับใส่ไม่พอดี - ฝาที่ใส่น้ำเปิดค้างไว้	- ใช้น้ำจนหมดทุกครั้งไม่ให้เหลือ - ถอดที่ใส่น้ำออกแล้วใส่กลับคืน - ปิดฝาที่ใส่น้ำ
แรงดันน้ำไม่แรง/น้ำไม่ไหล	- ปริมาณน้ำน้อยเกินไป - ท่อตัน	- เติมน้ำมากขึ้น - เติมน้ำอุ่นลงไป แล้วปล่อยให้น้ำไหลผ่าน
อุปกรณ์ไม่ชาร์จไฟ	เครื่องอยู่ในสถานะ ON	เลื่อนให้อยู่ในสถานะ OFF
อุปกรณ์ไม่ทำงาน	แบตเตอรี่ไม่มีพลังงาน	ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก 24 ชั่วโมง และชาร์จทิ้งไว้ค้างคืนหลังการใช้งานทุกครั้ง